


Zuverlässige Differentialdiagnostik bei systemischen Autoimmunerkrankungen

ENA plus ViraStripe®

Der ENA plus ViraStripe® ist ein Stripe-Immunoblot zum qualitativen Nachweis von spezifischen IgG Autoantikörpern gegen sechs Extrahierbare Nukleäre Antigene (ENA) in humanem Serum.

In einem einzigen Ansatz können spezifische ENA Autoantikörper der häufigsten Kollagenosen nachgewiesen und differenziert werden.

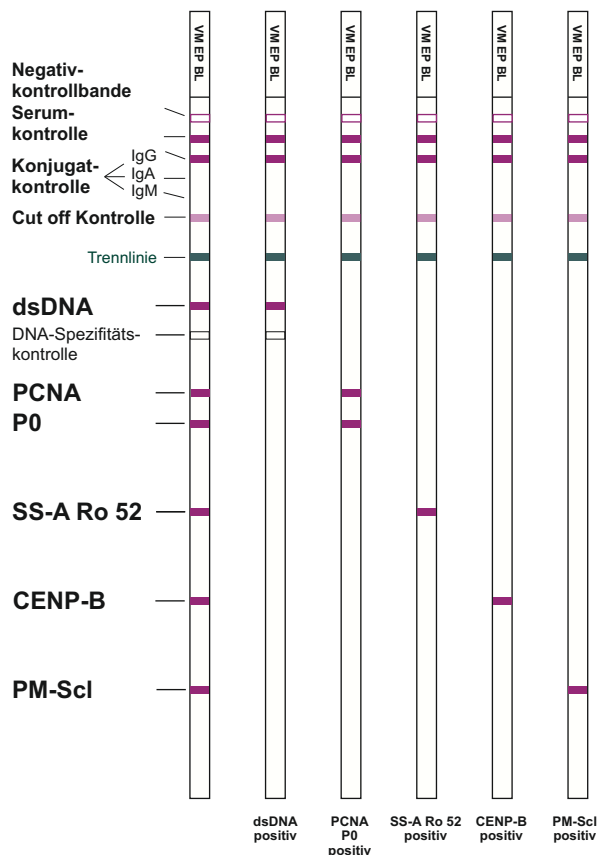

- Umfangreiche Ergänzung zum bewährten ENA ViraStripe®
- ENA plus ViraStripe® + ENA ViraStripe® = Antagenspektrum des ANA ViraStripe®
- Spezifischer Nachweis von dsDNA durch separate DNA Spezifitätskontrolle

⇒ **Systemischer Lupus Erythematoses**

⇒ **Systemischer Lupus Erythematoses**

⇒ **Polymyositis / Dermatomyositis, kongenitaler Herzblock**

⇒ **Sklerodermie, CREST-Syndrom**

⇒ **Myositis, Sklerodermie, Polymyositis, Sklerodermie Überlappungssyndrom**

Native und rekombinante Antigene

- hochgereinigte, spezifische Antigene
- hohe diagnostische Sensitivität und Spezifität
- einfache und zuverlässige Bandenbeurteilung
- exzellente Ringversuchsergebnisse

Automatisierte Auswertung mit dem

ViraCam® und **ViraScan®** System:

- schnelle und sichere Interpretation
- optimale Standardisierung
- einfache LIS- Anbindung und Archivierung



Best.-Nr.:

V-EPGSK	ENA Plus ViraStripe® IgG Test Kit	25 Teste	V-ENSGPK	Positives Kontrollserum	330 µl
V-UVNGKI	Universal Antihuman IgG Konjugat	4,5 ml	V-ENSGNK	Negatives Kontrollserum	330 µl